

冷冻干燥机

Desktop Freeze-Dryer | 桌上型

DC41A/41B

Made in Japan

最大冻结干燥量 蒸馏水200g (41A型)/分批 (41B型) 容器数量 5个

小容量 · 简洁的桌上型冷冻干燥机。



DC41A

DC41B

利用分子筛吸附，无制冷压缩机的冷冻干燥机。

- 最适合对温度敏感的样品进行冷冻干燥。
- 小容量的简洁桌上型，价格便宜。
- 无需冷冻机，不会出现冷冻机故障，也没有运行噪音。
- 停电时，排气阀启动，防止真空泵逆流。
- 吸附剂可方便的通过烘箱等再生。
- 与以往产品相比，作业时间可缩短1~2小时。

规格

型号	DC41A	DC41B
性能	冷却温度	-30℃以下 (样品1个时)
		-20℃以下 (样品5个时)
	最大冻结干燥量	蒸馏水200g/分批
构成	冷凝器	吸附剂 (分子筛)
	外形尺寸	外径150×高330mm
	材质	不锈钢板
	容器安装个数	5个
规格	真空计	布尔登式
	测定范围 (显示)	0~101kPa (0~76cmHg) 200~10 ⁻¹ Pa
	热电偶式	
规格	外形尺寸	宽340×深340×高446mm
	吸引口	外径18mm
	电源	AC100V 1A
附属品	重量	2.5kg
	真空阀	5个
	真空管	内径15mm×长1m 1个
	分子筛	2.5kg

选购品



装有分子筛的冷凝器只需要从保管器 (选购) 中取出插入就可组合完毕。



干燥烧杯



干燥烧杯盖



准备冷凝器保管容器，请根据冷冻干燥样品指定。




血清瓶



安瓿

冷却曲线

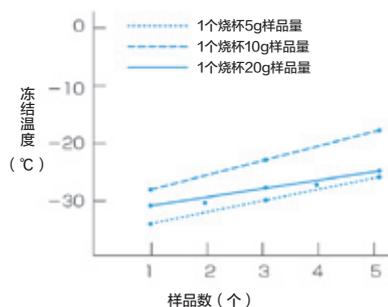

- 此数据使用的是选购品的120ml的烧杯。
- 样品为蒸馏水

品名	规格	商品号
干燥烧杯	120ml · 5个	212820
干燥烧杯盖 (带玻璃接口)	250ml · 5个	212821
	5个直	212570
	5个45°弯	212571
血清瓶 (带橡胶塞)	50ml · 10个	212814
	30ml · 10个	212815
	10ml · 10个	212816
安瓿连接器	单 5个	212572
	双 5个	212573
	三 5个	212574
冷凝器保管容器	—	212576
冷凝器	—	212577
分子筛 (消耗品)	3kg	9160016001